

# NDP Air Total+ Green

Oppervlaktedesinfectie  
via verstuiving

- Ideaal voor elke terminale desinfectie
  - Werkzaam tegen: Bacteriën, mycobacteriën, schimmels en virussen
  - Met ecologisch gas



**Tristel**™

# NDP Air Total+ Green

## Toepassingen

- Operatiekamers en en isolatiekamers
- Ambulances
- Laboratoria en clean rooms
- Medische praktijken
- Veterinaire praktijken
- Openbaar vervoer

## Werkzaamheid

- **Bactericide:** (EN1276, EN13697, EN13727) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*.
- **Mycobactericide:** (EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.
- **Fongicide:** (EN1650, EN13697, EN13624) *Aspergillus niger*, *Candida albicans*.
- **Virucide:** (EN14476) zoals het H1N1, griepvirus en virus sub titus lipo philes (griep, coronavirus, ebola, hepatitis, hiv)

## Samenstelling

- Didecyldimethylammoniumchloride
- Phenoxythanol
- Cinnemaldehyde
- Stuwgas en hulpstoffen

## Formaten

- Fles van **50 ml** voor desinfectie van 40m<sup>3</sup>
- Fles van **300ml** voor desinfectie van 150m<sup>3</sup>



CE  
0476  
Class IIa.

NDP Air Total + Green CE is een luchtgedragen desinfectiemiddel voor risico-oppervlakken. De verstuiving van deze « granaat » gebeurt middels het verbreken van een zegel dat onmiddellijk de verneveling doet opstarten. Deze verneveling zorgt voor een totaal bereik van het desinfectiemiddel tot op de moeilijkst toegankelijke plekken.

NDP Air Total + Green CE heeft een breed biocidaal spectrum gekoppeld met een snelle actietijd op bacteriën, schimmels en virussen.

NDP Air Total + Green CE bevat geen brandbare gassen, giftige bestanddelen of verontreinigende stoffen waardoor het kan worden gebruikt op plaatsen waar andere producten niet kunnen worden toegepast. Air total is volledig compatibel met alle soorten elektronische materialen en componenten.


## CE sanitair product klasse IIa

NDP Air Total+ Green met ecologisch gas 


## Luchtgedragen desinfectie zonder machine

### Gebruiksaanwijzingen

U kan de gebruiksaanwijzingen bekijken op onze website.

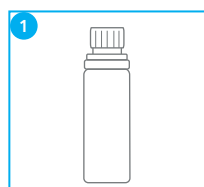


Plaats de flacon op een vlak oppervlak en verwijder de veiligheidsring.

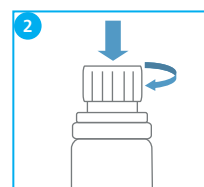

Druk op de verzegeling en draai hem volledig open. De verneveling duurt ongeveer 1 tot 3 minuten.



Eens de ontlading van het product is afgerond, laten inwerken. Niet gebruiken in de aanwezigheid van mensen.

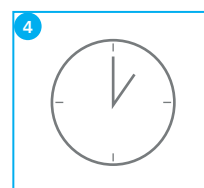

Wacht minstens een uur, of anderszins indien aangegeven door het ziekenhuisprotocol. Verlucht de kamer vooraleer ze te betreden indien nodig.

### Strips zijn beschikbaar om de draagwijdte van NDP Air Total+ Green te evalueren

- Teststrips die van kleur veranderen bij contact met het product.
- Maakt het testen van moeilijk bereikbare zones mogelijk.
- Onmiddellijk resultaat.